

EASY VET




 HOSPITEX
DIAGNOSTICS

EASYVET



I prodotti EASYVET forniscono soluzioni complete e razionali per la diagnostica veterinaria. Ogni prodotto della famiglia EASYVET si contraddistingue per una elevata facilità di utilizzo e per un rapporto prezzo/prestazioni di assoluto interesse, mantenendo l'affidabilità ed il valore diagnostico. I prodotti della linea EASYVET sono stati realizzati per rispondere alle varie esigenze cliniche per animali da compagnia e per animali da reddito. EASYVET fornisce, oltre ai classici strumenti diagnostici, avanzati pacchetti software sia per l'acquisizione e il salvataggio di immagini cliniche (tipicamente ottenute da scanner ad ultrasuoni o a raggi x), sia dedicati agli ECG.



 HOSPITEX
DIAGNOSTICS

EASYTRACE 1 VET




Semplice ed economico



Elettrocardiografo a 12 derivazioni, singolo canale, ideale per lo screening di base. Semplice da utilizzare, grazie alla funzione "One Touch", che permette di ottenere una stampa completa di tutte le derivazioni premendo un solo pulsante. La facilità d'uso è evidente per la presenza del display alfanumerico che visualizza i parametri di impostazione dell'elettrocardiografo.

- Stampa digitale ad alta risoluzione su carta termica da 50 mm
- Filtri digitali per la soppressione di disturbi esterni
- Possibilità di utilizzo sia con tensione di rete che con batteria
- Peso contenuto e maniglia integrata per una totale portabilità

 HOSPITEX
DIAGNOSTICS

EASY TRACE 3/6/12 VET



La risposta ad ogni esigenza di VET ECG:

Una linea di prodotti specificatamente concepita per applicazioni cardiologiche veterinarie. Un' ampia scelta di opzioni, di software e di accessori, rendono questa gamma di prodotti estremamente flessibile ed adattabile a tutte le esigenze diagnostiche e operative.

- Stampa da 1 a 12 derivazioni su carta termica da 63/110/216 mm



- Visualizzazione dei parametri di acquisizione su display alfanumerico di derivazioni ECG a scelta (da 1 a 3 in tempo reale) su display grafici




- Cavo ECG dedicato ad applicazioni veterinarie
- Semplicità d'uso tramite funzione "One Touch"



- Filtri digitali per la soppressione di disturbi esterni
- Misura automatica dei parametri elettrocardiografici
- Trasmissione dati con PC tramite software dedicato.

 HOSPITEX
DIAGNOSTICS

SONOSCREEN H VET

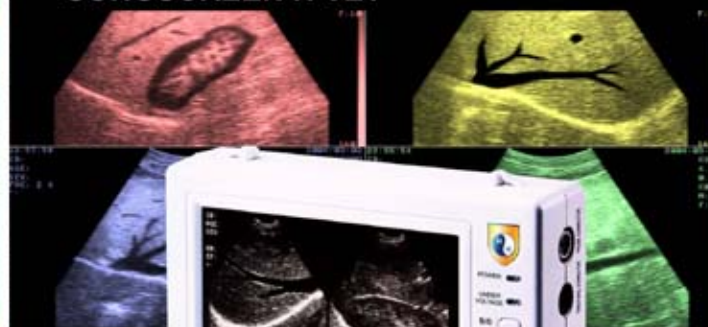

Dimensioni
148 X 112 X 42 mm

Lo scanner ad ultrasuoni "palmare"

E' il più piccolo scanner ad ultrasuoni che, con le sue dimensioni estremamente contenute, rappresenta la soluzione ottimale per animali domestici e da reddito.

Sonoscreen H VET e' uno scanner ad ultrasuoni completo di:

- Trasduttore settoriale meccanico 3.5 Mhz (standard), 5.0 Mhz (opzionale o alternativa)
- Completo pacchetto calcoli
- Monitor incorporato TFT 5" ad alta definizione
- 256 livelli di grigio
- Zoom multistep (X1.0, X1.2, X1.5, X2.0)
- Semplici menu' operativi ad accesso diretto
- Batteria: 2200 mAh (2 ore di lavoro continuo)
- Alimentazione: batteria 10-12 V/DC adattatore
- Peso: 600 g

Sonoscreen H VET risulta lo strumento più adatto ed efficiente in applicazioni sul campo o in situazioni di emergenza, dove vi è bisogno di un apparecchio a batterie o quando la portatilità estrema è indispensabile.

Sonoscreen H VET è lo scanner ad ultrasuoni ideale per ogni tipo di ambulatorio veterinario, soprattutto in ambienti ristretti o complessi.

 HOSPITEX
DIAGNOSTICS

SONOSCREEN L / C



Una famiglia di prodotti completa

Nata per rispondere a tutte le esigenze diagnostiche, questa gamma di prodotti è costituita da tre scanner portatili ad ultrasuoni, contraddistinti da una elevata qualità di immagine, un'ampia versatilità operativa, una notevole semplicità di utilizzo e da interessanti soluzioni tecnologiche. La scelta del modello varia in base alle applicazioni per cui verrà utilizzato, ai trasduttori e alle caratteristiche specifiche richieste.

- Disegno ergonomico, tastiera reclinabile, elevata portatilità
- Monitor interno da 7"
- Uscita SVGA per collegare un monitor esterno a colori
- 256 livelli di grigio
- Funzione Cine loop
- Zoom Multistep
- Completo pacchetto calcoli
- Tastiera alfanumerica completa per annotazioni
- 1 o 2 connettori sonda

Vasta scelta di trasduttori convessi, lineari, settoriali meccanici e microconvessi a singola o multifrequenza.



 HOSPITEX
DIAGNOSTICS

EASYVET



Razionalizzare il lavoro di tutti i giorni:

In aggiunta ai tradizionali scanner ad ultrasuoni ed ECG, la linea EASYVET è costituita da una serie di pacchetti software per razionalizzare e "digitalizzare", il lavoro di tutti i giorni:

• **Imaging Software:** una linea di pacchetti software dedicati all'acquisizione di immagini diagnostiche o "loops" da diverse fonti (tipicamente ultrasuoni e raggi x), per la compilazione dei referti ed il salvataggio su media digitali.

I software garantiscono la compatibilità anche con apparecchiature non fornite da EASYVET e permettono di razionalizzare e semplificare le procedure ambulatoriali, riducendo notevolmente i costi e gli spazi di archiviazione.

• **Cardiology Software:** software dedicati al trasferimento su PC di tracciati acquisiti con ECG EASYTRACE 3/6/12.

I tracciati così trasferiti, possono essere registrati come referti, archiviati su hard disk o su altro media digitale, stampati con una qualsiasi stampante o inviati per posta elettronica.

Distributore:



HOSPITEX DIAGNOSTICS è una ditta a partecipazione e molti servizi sono a pagamento. Tutti i diritti sono riservati.



Via. P.le Incisa Lucchese 145,
50019 OSMANNORO
BESTO FIORENTINO (FI)
- ITALY -

Tel. +39 055 3743 83
Fax +39 055 3743 84
e-mail: hospitex@onda.it
<http://www.hospitex.com>